

事 務 連 絡
令和 7 年 8 月 12 日

一般社団法人日本医療法人協会 御中

厚生労働省保険局医療課

完成用部品の自主回収と交換について（周知依頼）

標記について、別添のとおり、地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて連絡したのでお知らせします。

事 務 連 絡
令和7年8月12日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

完成用部品の自主回収と交換について（周知依頼）

この度、完成用部品の自主回収と交換について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室及びこども家庭庁支援局障害児支援課より別添事務連絡（令和7年8月7日付け）が発出されましたので、お知らせします。

補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、安全に関わる問題が発生する可能性がある旨、製造会社より報告があったため、使用者が当該製品の交換を速やかに行えるよう、支給決定を行っている保険者及び治療用装具製作事業者へ本情報の提供をお願いいたします。

その際、保険者において、支給決定情報を参考に、該当する使用者及び治療用装具製作事業者を特定し、使用者が確実に当該製品の交換を受けるのに必要な情報が届くための手段を講じていただくよう、よろしくお取り計らいいただきますようお願いいたします。

なお、該当製品については、令和3年4月に完成用部品として掲載され、令和6年8月に販売中止となっており、今後の支給決定時にはその点もご留意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

記

1. 該当製品

啓愛 K-TB58AAL ピラミッドレシーバーチューブ アルミ

啓愛 K-TB58ATI ピラミッドレシーバーチューブ チタン

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（令和7年3月31日付障発0331第29号・こ支障第83号）

【該当区分・名称・型式】

骨格構造義肢・義足用部品・義足調整用部品・チューブ・ピラミッド（メス）付

（照会先）

厚生労働省保険局医療課

TEL:03-5253-1111（内線 8034）

E-mail: ryouyouhi@mhlw.go.jp

事務連絡
令和7年8月7日

各 都道府県
指定都市
中核市 障害保健福祉主管課 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
こども家庭庁支援局障害児支援課

完成用部品の自主回収と交換について（周知依頼）

この度、補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、安全に関わる問題が発生する可能性がある旨、別添のとおり製造会社より報告がありました。

つきましては、使用者に当該製品の情報を速やかに届ける必要があり、支給決定に関わる市町村、更生相談所及び補装具製作事業者へ本情報の提供をお願いいたします。

また、各市町村に対して情報提供する際は、支給決定情報を参考に、該当する使用者及び補装具製作事業者を特定し、速やかにかつ確実に情報を届けるための手段を講じるよう、周知徹底をお願いいたします。

なお、該当製品については既に販売中止となっており、今後の支給決定時にはその点もご留意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

記

1. 該当製品

啓愛 K-TB58AAL ピラミッドレシーバーチューブ アルミ

啓愛 K-TB58ATI ピラミッドレシーバーチューブ チタン

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（令和7年3月31日付け障発 0331 第29号・こ支障第83号）

【該当区分・名称・型式】

骨格構造義肢・義足用部品・義足調整用部品・チューブ・ピラミッド（メス）付

有格構造義肢

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	義足調整用部品	ピラミッド (メス) 付	16,100	ピラミッドレシーバー	ピラミッドレシーバーチューブ アルミ
			17,100	ピラミッドレシーバーII	ピラミッドレシーバーチューブ アルミ 100kg 対応
			12,300	ピラミッドレシーバー	ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス
			18,700	ピラミッドレシーバー	ピラミッドレシーバーチューブ チタン

2. 交換対応及び製品に関する問い合わせ先について 「別添 自主回収のお知らせ」を参照

以上

【問合せ先】

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室 障害者支援機器係 野原
TEL：03-5253-1111（内線 3511）

2025年 8月 7日

お得意様各位
関係者各位

株式会社啓愛義肢材料販売所



自主回収のお知らせ

謹啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、下記の製品について使用状況によってピラミッドレシーバーとチューブの接続部が回旋することにより、事故が発生する可能性があることが判明しました。これに伴い製品の回収をさせていただきます。安全試験については改めて現在実施中ですが、複数の破損が確認できましたので試験結果を待たずに回収することに決定いたしました。

安全試験の結果につきましては、分かり次第、ご報告させていただきます。

また、ご使用中の製品に関しましても、大変申し訳ございませんが回収対象とさせて頂き交換をさせていただきます。未使用の在庫及びご利用者様使用品の回収を含めご協力をお願いします。

本件に関してご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに誠に恐縮ではございますが、回収と交換のご協力をお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

1. 対象製品


骨格構造義足 義足調整用部品 チューブ ピラミッド（メス付）

型番 K-TB58ATI 部品名称 ピラミッドレシーバーチューブ チタン

型番 K-TB58AAL 部品名称 ピラミッドレシーバーチューブ アルミ

2. 回旋するケースの使用状況

チューブアルミとピラミッドレシーバーの接続部に回旋が認められた。

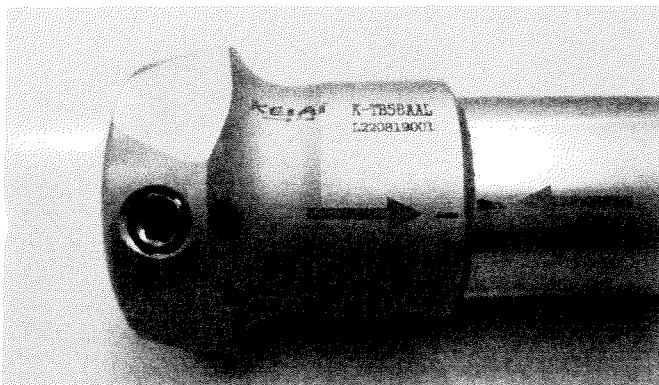

3. 原因

チューブアルミとピラミッドレシーバーの結合部のはめあい公差および接着力不足

4. 交換対応製品

アルミの場合

K-TB884AAL (チューブアルミ 400mm (φ30)) と K-CA75AAL (ピラミッドレシーバー
チューブクランプ アルミ (φ30))

チタンの場合

K-TB884AAL (チューブアルミ 400mm (φ30)) と K-CA75ATI (ピラミッドレシーバー
チューブクランプ チタン (φ30))

5. 時期

即日

【お問い合わせ窓口】

株式会社啓愛義肢材料販売所

TEL 048-837-5211 又は営業担当者

以上